

Indholdsfortegnelse

Modem	2
Find disse ting frem.....	4
Behandlingsstart.....	4
Tilslut dig selv	10
Afslutning af behandling	13
Hvad gør du hvis du har anvendt ublandet dialysevæske	16
Gode råd.....	17
Alarmer og fejlsøgning	19
Gå videre til næste fase (fase = indløb, dialyse eller dræn).....	23
Frakobling under behandlingen	24
Afslutning af behandling i utide.....	25
Åbningstider.....	26
Bilag.....	27



Modem

1. Kontroller at modemmet er tændt og tilsluttet maskinen (lyser med grønne streger).


Herefter tændes maskinen på bagside.

Der står nu VENTER...

Hvis maskinen har modtaget nye behandlingsindstillinger:

Tekstruden viser:

**Hej
DIT NAVN**

2. Tryk , når dit navn vises


Tekstruden viser:

**OPRETTER
NETVÆRKSFORBINDELSE**

3. Vent et par minutter og der kommer en Bip lyd

Tekstruden viser:

**BEKRÆFT
INDSTILLINGER**

4. Tryk  for hver ny værdi i tekstruden:



5. Tryk 




6. tryk 

ER PROGRAMMET KORREKT

5. TRYK  og VENT...

6. Programmet accepteret af maskinen.
Vent til det er muligt at indstille din vægt:

7. Indstil Vægt tryk  tallene blinker tryk pil op/ned til vægten vises.

8. Tryk  for at gemme dine værdier

9. TRYK 

Tekstruden viser:

**STANDARDFUNKTION
VALGT**

Maskinen går automatisk videre til:

**TRYK GRØN FOR
AT STARTE**

Maskinen kan klargøres i god tid før behandlingsstart.

Tilkoblet væske skal være brugt indenfor 24 timer.

Find disse ting frem


Dialyseposer
Slangesæt
Jodkapsel

Jodprop
Afløbsslange eller afløbsdunk
Klorhexidin håndsprit

Behandlingsstart

1. Kontroller at modem sidder i maskinen.
2. Vask hænderne med sæbe og vand i mindst 30 sekunder.
3. Tænd for HomeChoice Claria. Tekstruden viser:

Hej og DIT NAVN

4. Tryk på , når dit navn vises.

Tekstruden viser:

**OPRETTER
NETVÆRKSFORBINDELSE**

Tekstruden viser:


STANDARD FUNKTION VALGT

Maskinen går automatisk videre til:

TRYK GRØN FOR AT STARTE




6. Kontrollér dialyseposen for styrke, volumen og udløbsdato.

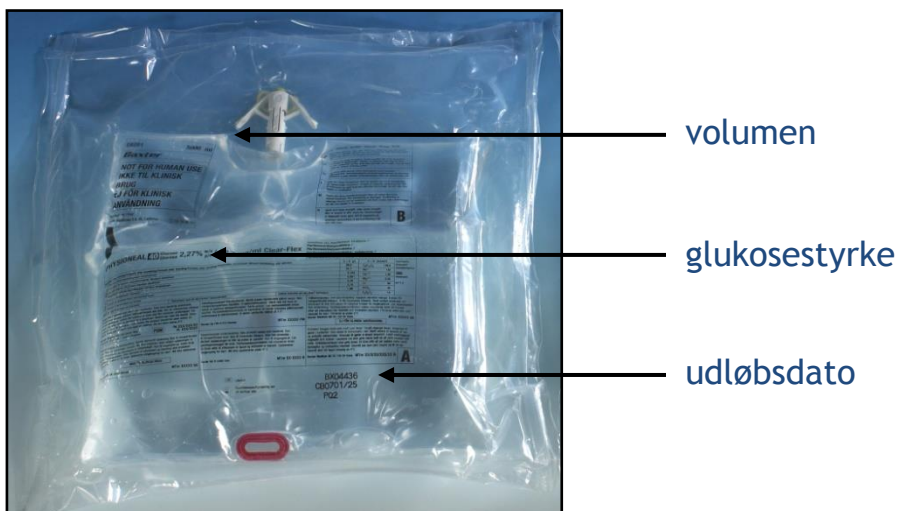

7. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.
 8. Fjern yderposen og kontrollér at dialyseposen er hel (tryk på posen for at se om den er tæt) og kontrollér at den lange og korte forsegling ikke er brudt på noget sted. Kontrollér at koblingen er intakt/hel. Kassér dialyseposer, hvis den lange eller korte forsegling er brudt, eller hvis der er utætheder eller andre fejl. Vær venlig at opbevare og returnere alle dialyseposer, der har fejl, til din PD afdeling eller chaufføren.
 9.
Ved Clearflexposer: Kontrollér at den lange og korte forsegling ikke er brudt på noget sted. Kontrollér at koblingen er intakt/hel. Kassér dialysepose, hvis den lange eller korte forsegling er brudt, eller hvis der er utætheder eller andre fejl...
 - Ved Physionealposer:** Kontrollér at forseglingen ikke er brudt på noget sted. Kassér dialyse poser ,hvis forseglingen er brudt, eller hvis der er utætheder eller andre fejl.
- Vær venlig at opbevare og returnere alle dialyseposer, der har fejl til ambulatoriet eller chaufføren.

10. Bryd den lange forsegling: tag solidt fat i hver side af det store kammer, drej hænderne udefter og tryk dialysevæsken mod midten af den lange forsegling. Tryk på posen for at bryde forseglingen helt.

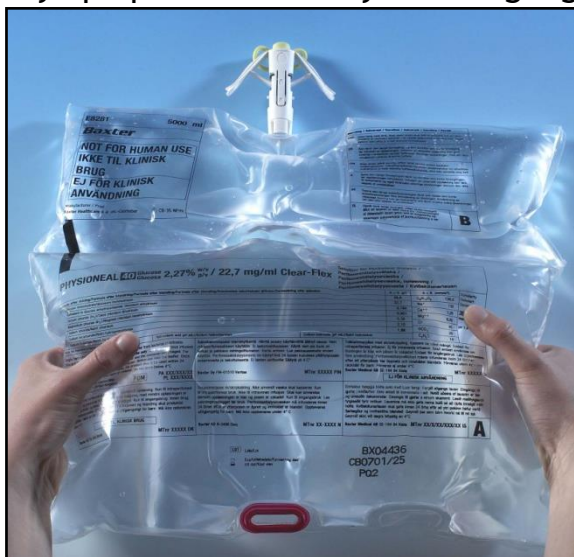

11. Åbn den korte forsegling ved at løfte det store kammer og tag fat i posen med begge hænder og rul posen henimod koblingen. Pres ved at du læner dig over dialyseposen.



12. Bryd de øvrige poser.
13. Læg en dialysepose på varmepladen og placér de øvrige i nærheden af maskinen. Sørg for at dialyseposen på varmepladen er i kontakt med varmesensorknappen, så dialyseposen varmes op.

14. Tryk ● Tekstruden viser:

MONTER SLANGESÆT



15. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.

16. Pak slangesættet ud og luk alle klemmer (6 i alt).



17. Åbn lågen. Sæt kassetten i maskinen.

17. Tryk ● Tekstruden viser:

SELV TEST...



18. Sæt afløbsslange på eller læg afløbsslange ned i afløbsdunken.



19. Hvis slangesættet er godkendt viser tekstruden:

**TILSLUT POSER
ÅBEN KLEMMERNE**



20. Gør hænderne rene med Klorhexidin håndsprit



21. Slangen med **rød** klemme tilsluttes varmeposen.
22. **Blå** klemme til evt. dagspose.
23. Hvide klemmer til de resterende poser
24. Ved Clearflex. Luk vingerne på posens kobling ved at bruge en hånd. Du vil høre nogle klik. Hold ikke på selve koblingen, mens vingerne lukkes.




25. Ved Physioneal/Extraneal: Knæk den grønne brudstift.

Gentag punkt 22 og 25 indtil samtlige dialyseposer er tilsluttet.

- Sluk for maskinen her, hvis du vil vente med at fylde slangerne indtil start af behandlingen

26. Åbn alle klemmer på slangesættet.

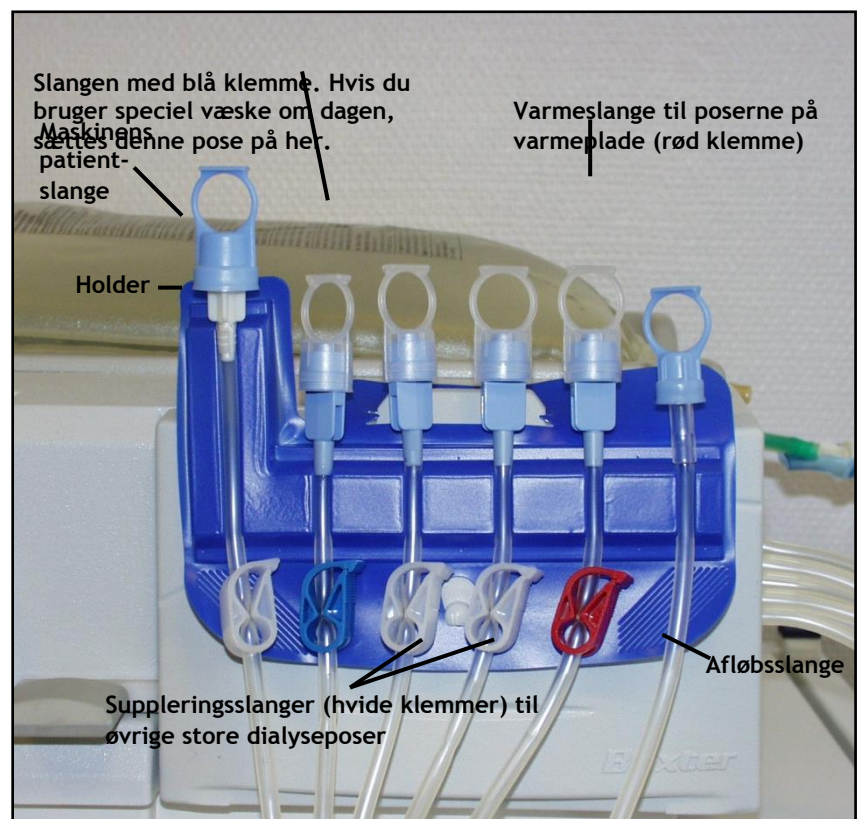

27. Tryk  Tekstruden viser:

FYLLER SLANGERNE...



28. Når fyldning af slangerne er slut skifter tekstruden mellem:

**TJEK PATIENTSLANGE &
TILSLUT DIG SELV**



Tilslut dig selv

Tekstruden viser skiftevis:

**TJEK PATIENTSLANGE &
TILSLUT DIG SELV**



1. Vask hænderne med sæbe og vand i mindst 30 sekunder.

2. Find kateteret frem



3. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.

4. Åbn for en ny jodkapsel.



5. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.

6. Skru patientslangen og maskinens patientslange sammen.



7. Sæt iodkapsel på



8. Åbn for patientslangen.



9. Tryk ● Tekstruden viser:

CHECK 1. DRÆN XXXX ML

Skal stå på 0ml, hvis
behandlingen opstartes
uden væske i maven.

10. Tryk ● Tekstruden viser:

FØRSTE DRÆN



Behandlingen starter

Afslutning af behandling


Tekstruden viser:

BEHANDLING SLUT



1. Tryk  og notér:

1. DRÆNVOLUME: ML

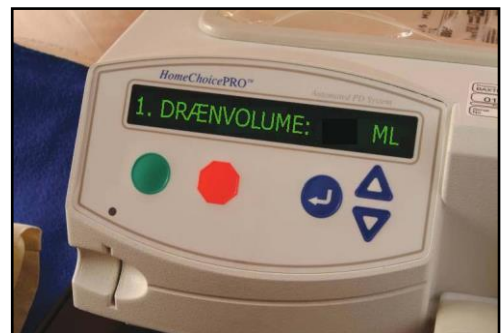

2. Tryk  og notér

TOTAL UF: ML



3. Tryk ● Tekstruden viser:

LUK ALLE KLEMMER



4. Luk for patientslange og maskinens patientslange.

5. Tryk ● Tekstruden viser:

**LUK ALLE KLEMMER
KOBLE DIG SELV FRA**



6. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.



7. Åbn en ny jodprop.

8. Gnid hænderne med Klorhexidin håndsprit.

9. Skru patientslangen og maskinens patientslange fra hinanden og sæt jodprop



på patientslangen.

10. Fixer patientslangen

11. Tryk  Tekstruden viser:

TAG KASSETTEN UD



12. Smid slangesættet og poserne ud. Tøm rest væske i poserne i toiletet

11. Tryk 

12. Data overføres automatisk til hospitalet og Tekstruden viser:

**OPRETTER NETVÆRKS-
FORBINDELSE**

Tekstruden viser herefter automatisk:

SLUK FOR MASKINEN



13. Sluk for maskinen bag på.
14. Smid slangesæt, de tomme poser og afløbsslangen ud
15. Tør maskinen af med en opvredet sæbeklub.

Se punkt 4 og 5 under Gode råd

Hvad gør du hvis du har anvendt ublandet dialysevæske

1. Udfør øjeblikkeligt et manuelt udløb.
 2. Afslut behandlingen i utide.
Se side 25 for instruktion.
1. Du skal nu lukke en ny blandet dialysevæske ind.
 2. Kontakt afdelingen for at informere lægen eller sygeplejersken om at du har lukket ublandet dialysevæske ind.

De vil måske instruere dig i at starte behandlingen op igen eller udføre et manuelt poseskift.

OBS! Er der lukket ublandet dialysevæske ind, vil det kunne give mavesmerter. Hvis du oplever mavesmerter under eller lige efter indløb, skal du checke, at begge forseglinger er brudt på alle dialyseposer.

Gode råd

1. Opvarmning af dialysepose på varmepladen

Det tager ca. 20/40 minutter at opvarme dialyseposen på varmepladen. Hvis du er i tidsnød, er det en god ide at lægge dialyseposen på varmepladen på maskinen, før du monterer slangesættet.

Slangesættet bør opbevares ved stuetemperatur. Hvis slangesættet bliver opbevaret for koldt, kan det give problemer, da membranerne på sættet så er stive.

2. Comburtest, når der bruges udløbsdunk

- Åben klemmen på den lille udløbsslange, når du har drænet i mindst 2 minutter.
- Klem den lange udløbsslange af.
- Lad herefter mindst 50 ml udløbsvæske løbe ned i en dunk eller kop og lav herefter Comburtest.
- Luk klemmen på den lille udløbsslange igen.

3. Comburtest, når der bruges udløbsslange

- Når du har drænet i mindst 2 minutter åbnes den blå klemme på den lange udløbsslange og den hvide klemme på den korte udløbsslange lukkes.
- Lad herefter mindst 50 ml udløbsvæske løbe ned i en dunk eller kop og lav herefter Comburtest.
- Luk den blå klemme på den lange udløbsslange igen.

4. Skiftning af afløbsslange

Afløbsslangen skiftes 1 x ugentligt. Slangen må max. være 7-10 meter.

5. Rengøring af afløb

Hvis du bruger afløbet under vasken til det brugte væske, er det en god ide at skylle afløbet hver dag med 1-2 liter kogende vand for at undgå, at afløbet stopper til.

6. Maskinens placering

Maskinen skal være i niveau med din seng eller 30 cm under eller over.

7. Blå spiral

Hvis du har mange alarmer på grund af at du kommer til at ligge på slangen om natten, findes der en spiral, som du kan anvende for at undgå dette. Spørg din afdeling, hvis dette er et problem.

8. Håndtering af tomme dialyseposer

Læg yderposer og tomme dialyseposer i en bunke ovenpå hinanden. De kan lægges i en tom kasse, foldes, rulles eller bindes/tapes sammen og kasseres i dagrenovation.



Alarmer og fejlsøgning

Tekstruden viser:

Alarmeddelelse:

CHECK UDLØBSSLANGE

CHECK SIDSTE SLANGE
(blå klemme)

CHECK VARMESLANGE
(rød klemme)

CHECK PATIENTSLANGEN

CHECK SUPPLERINGSSLANGEN
(hvide klemmer)

Årsag til alarm:

HomeChoice Claria fortæller hvilken slange, der er stoppet.



Hvad gør jeg:

Kontrollér slangen med hensyn til:

1. Knæk
2. Lukkede klemmer
3. Fibrin
4. Ikke knækket brydestift (Extraneal, Nutrineal)
5. Ikke lukkede vinger
6. Ubrudte forseglinger

Ret problemet. Det er ikke nødvendigt at trykke på nogle knapper.

**Hvis maskinen
alarmerer konstant:**

Tryk  for at standse alarmeren
Ret problemet
Tryk  for at fortsætte dialysen

Tekstruden viser:

Alarmeddelelse:

CHECK SLANGER + POSER



Årsag til alarm:

HomeChoice Claria fortæller, at der er mere end en slange, som er stoppet.

Hvad gør jeg:

Kontrollér slanger og dialyseposer med hensyn til:

1. Knæk
2. Lukkede klemmer
3. Tomme dialyseposer
4. Ikke knækket brydestift (Extraneal, Nutrineal)
5. Fibrin
6. Ikke lukkede vinger
7. Ubrudte forseglinger

Tryk  for at stoppe alarmen. Ret problemet.
Tryk  for at fortsætte dialysen.

Tekstruden viser:

Alarmeddelelse:

DRÆN IKKE AFSLUTTET


INDLØB IKKE FÆRDIG

GENFYLDNING EJ KLAR

Årsag til alarm:

Du har forsøgt at springe en alarm eller en fase over, som ikke er færdig. Alarmen kan kun rettes manuelt.

Hvad gør jeg:

Tryk  for at stoppe alarmen. Hvis du er sikker på, at du vil "Gå videre" fra alarmen/fasen, tryk på



til tekstruden viser:

Gå videre

Tryk  for at "Gå videre"

Tekstruden viser:



Alarmeddelelse:

MONTER NYT SLANGESÆT

Årsag til alarm:

Hvis HomeChoice Claria under selvtesten skriver "Monter nyt slangesæt" kan der være fejl på slangesættet.

Hvad gør jeg:

Tryk  for at stoppe alarmerne.
Fjern slangesættet.
Monter et nyt slangesæt.
Tryk  og følg instruktionerne på tekstruden.

Gem slangesættet og yderpose og medbring det ved næste kontrol.

Tekstruden viser:



Alarmeddelelse:

FOR LIDT UDLØB

Årsag til alarm:

Drænvolumen er for lille.

Hvad gør jeg:

Tryk på  for at stoppe alarmerne.
Læg dig på den anden side eller sæt dig op.
Eller sænk maskinen til en lavere højde (max. 30 cm).
Tryk  for at fortsætte dialysen.

OBS:

**Hvis alarmerne "For lidt udløb" kommer igen - check udløbsvolumen.
Du kan eventuelt "Gå videre" fra alarmerne, dvs. springe over til indløb, se side 19.**

Tekstruden viser:


Alarmeddelelse:

SYSTEMFEJL

Årsag til alarm:

Der er opstået en fejl "indeni" *HomeChoice Claria*.

Hvad gør jeg:

Tryk på  for at stoppe alarmerne.
Sluk og tænd for maskinen. Kan gentages 2 gange.
Hvis maskinen ikke fortsætter, og systemfejlen stadig ses i tekstruden.
Noter tallene i tekstruden.
Sluk for maskinen. Kontakt Nefrologisk ambulatorium næste dag.

Gå videre = springe videre til næste fase

(fase = indløb, dialyse eller dræn)

Der må aldrig Gå videre, når maskinens tekstrude viser en alarm. Er der alligevel brug for at springe videre til næste fase pga. problemer med alarmer, skal følgende procedure følges.

Nedenfor vises et eksempel på hvordan du kan springe en drænfase over med Gå videre funktionen.

Tekstruden viser:

FOR LIDT UDLØB

1. Tryk  Tekstruden viser:

FOR LIDT UDLØB

eller

DRÆN 3 AF 5

2. Tryk  Tekstruden viser:

DRÆN 3 AF 5

3. Tryk  Tekstruden viser:

STOP: DRÆN

4. Tryk  indtil tekstruden viser:

GÅ VIDERE

5. Tryk  Tekstruden viser:

DRÆN IKKE AFSLUTTET

Der høres en alarm

6. Tryk  Tekstruden viser:

DRÆN IKKE AFSLUTTET

eller

DRÆN 3 AF 5

7. Tryk  indtil tekstruden viser:

GÅ VIDERE

8. Tryk  Tekstruden viser:

INDLØB 4 AF 5


Frakobling under behandlingen

1. Tryk  Tekstruden viser

STOP XX X

2. Luk for patientslangen.
3. Luk klemmen på maskinens patientslange.
4. Åben en ny jodprop, lad indersiden af papiret være urørt (Gem posen).
5. Sprit hænderne.
6. Skru patientslange og maskinens patientslange fra hinanden (Behold jodkapslen på).
7. Sæt maskinens patientslange i holderen på maskinen.
8. Sæt den nye jodprop på patientslangen.
9. Sæt posen fra jodproppen over jodkapslen på maskinens patientslange.

Efter "pausen".

1. Vask hænderne.
2. Tag posen af maskinens patientslange.
3. Sprit hænderne.
4. Skru straks patientslangen og maskinens patientslangen sammen.
5. Åben for patientslangen.
6. Åbn for klemmen på maskinens patientslange.
7. Tryk  og behandlingen fortsætter.



For hver gang der kobles til og fra maskinen, øges risikoen for at få bakterier ind i det sterile system.

Afslutning af behandling i utide

Tekstruden viser:


Sluk for HomeChoice Claria bag på maskinen

Tænd for HomeChoice Claria igen

VENT...

Efter nogle sekunder vil tekstruden vise:

STRØM IGEN

Tryk  for at standse alarmerne.

Tekstruden skifter nu mellem:

STRØM IGEN

og

XXXX XXXX

Tryk



INDLØBSVOL.: ML

eller

REST DIALYSETID: XX:XX

eller

DRÆN VOLUMEN: ML

Tryk



1. DRÆNVOLUME: ML

Tryk



TOTAL UF: ML

Tryk



GNS. DIALYSETID: X:XX

Tryk



AFSLUT BEHANDLING

Tryk



LUK ALLE KLEMMER

Herefter følges den normale afslutningsprocedure

Åbningstider

Vi har i Ambulatoriet følgende telefontider:

Kl. 8.00 - 9.00 eller kl. 13.00 - 14.00

Fortrinsvis hvis du har maskinproblemer eller udløbsproblemer.

Vores tlf. nr. er 79 182258

Det er selvfølgelig muligt i akutte tilfælde at ringe uden for disse tider

Amb. 244's åbningstid er: mandag - fredag kl. 7.30 - 15.00

Udenfor vores åbningstid fra kl. 15.00 - 8.00 samt weekender og helligdage kontaktes **Sengeafdeling 272 på tlf. nr. 79 182257.**

Ved mistanke om bughindebetændelse er det vigtigt at der straks tages kontakt.

Ved problemer med maskinen bedes kontakten tages i dagtiden.

Bilag

Slange med rød klemme tilkobles: _____

Slange med blå klemme tilkobles: _____

Slange med hvid klemme tilkobles: _____
